



**FGP** Orthopedic  
& Rehabilitation  
Equipment

**LA SCELTA  
SICURA, DOPO  
UN INTERVENTO  
CHIRURGICO.**



**ELASTIC CARE**

Fasce post-operatorie

# FGP ELASTIC-CARE è la nuova linea di fasce elastiche progettate specificamente per l'utilizzo post-operatorio, come raccomandato dagli specialisti.


## QUALITÀ E INNOVAZIONE PER LA SALUTE E IL BENESSERE POST-OPERATORIO.

Dall'esperienza e il know-how di FGP nasce la linea FGP ELASTIC-CARE.

Con soli tre modelli, FGP ELASTIC-CARE ottimizza l'esperienza del recupero post operatorio, fornendo fasce di diverse altezze e conformazioni che offrono una copertura completa alle diverse necessità del paziente, garantendo la soluzione di ogni problematica.


Nello sviluppo di questa linea abbiamo prestato un'attenzione particolare alla scelta dei materiali, alla sua modellazione e al comfort.

Tutti i materiali usati sono stati testati per garantire un uso anche a diretto contatto pelle mentre il trattamento Sanitized® controlla eventuali odori sgradevoli che potrebbero insorgere.

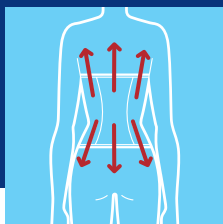

### PRESSIONE UNIFORME

Con una pressione uniforme sulla zona trattata, queste fasce riducono le tensioni ai margini delle ferite, favorendo la formazione di cicatrici di alta qualità.

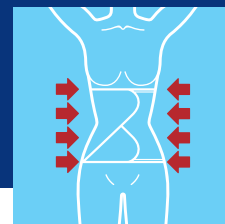

### EFFETTO COMPRESSIVO

L'effetto compressivo della fascia è fondamentale per contenere o prevenire il rilassamento dei muscoli addominali, fondamentali per ridurre la spinta degli organi interni sulla parete addominale.

# EQUILIBRIO PERFETTO TRA SUPPORTO E PRATICITÀ.

FPO 100



FPO 300



La nuova linea di fasce post-operatorie FGP in grado di soddisfare ogni esigenza medica e ogni conformazione anatomica.

Il modello **FPO 100** (disponibile in altezza 24 cm e 30 cm) e il modello **FPO 200** (in altezza 27 cm) con design sagomato, sono realizzati in **cotone makò**, **una fibra naturale di alta qualità**, sinonimo di traspirabilità e comfort.

Entrambi sono disponibili in colore bianco e grigio.

Il modello **FPO 300** è realizzato con un materiale, made in FGP, composto da poliammide/elastan totalmente velcrabile che lo rende **universale**, in altezza 27 cm per essere adatto a tutte le necessità e conformazioni fisiche.



### **PATELLE ANTERIORI**

Velcrabili e di ampie dimensioni, per permettere un'ottima adattabilità alle varie conformazioni anatomiche dei pazienti. Dotate di taschino esterno per facilitare la chiusura e il corretto posizionamento.

### **CHIUSURA ANTERIORE A DOPPIA PATELLA**

La doppia banda garantisce una maggiore praticità nell'applicazione e regolazione da parte del paziente. Inoltre migliora la sua adattabilità alla conformazione sia maschile che femminile.



### **PERFETTO BINOMIO TRA ELASTICITÀ E CONTENIMENTO**

Il cotone makò ad alta elasticità utilizzato per la fascia garantisce un ottimo effetto compressivo. Disponibile anche in colore grigio.



### **STECATURA ANTIARRICCIAMENTO**

La combinazione di stecche a spirale in acciaio e in PVC mantiene la fascia nella corretta posizione prevenendo l'eventuale arrotolamento.

### **TRATTAMENTO SANITIZED®**

Utile a controllare la formazione di odori sgradevoli.





## FPO 100

**COD. D'ORDINE:**  
FPO-100 (bianca) - FPO-101 (grigia)

### FASCIA ADDOMINALE ELASTICA COMPLETAMENTE APERTA



#### INDICAZIONI

Dispositivo atto al contenimento dei tessuti e della muscolatura del tronco.

Utile, ad esempio, negli scenari post-operatori di interventi addominali e post-partum.

MD

#### STRUTTURA

- tessuto realizzato in cotone makò altamente elastico, traspirante e compressivo
- parte anteriore grippante ampia per una buona adattabilità
- il materiale di base ha subito un trattamento Sanitized® odor-free

#### STECCATURA

- 3 stecche a spirale posizionate nella parte posteriore ed una nella parte anteriore utile ad evitare l'arricciamento e garantirne la stabilità

#### CHIUSURA ANTERIORE

- grippante con doppia patella indipendente, utile a garantire una personalizzazione e comfort assolute

#### NOTE

- la fascia può essere indossata anche a diretto contatto con la cute
- disponibile in altezza 24 e 30 cm
- disponibile in colore bianco e grigio

#### MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	70-82 cm
M	82-94 cm
L	94-105 cm
XL	105-117 cm
XXL	117-130 cm
XXXL	130-150 cm



**Altezza**  
24 cm  
30 cm

#### Colori disponibili



## FPO 200

**COD. D'ORDINE:**  
FPO-200 (bianca) - FPO-201 (grigia)

### FASCIA ADDOMINALE ELASTICA COMPLETAMENTE APERTA



#### INDICAZIONI

Dispositivo atto al contenimento dei tessuti e della muscolatura del tronco.

Utile, ad esempio, negli scenari post-operatori di interventi addominali e post-partum.

MD

#### STRUTTURA

- tessuto realizzato in cotone makò altamente elastico, traspirante e compressivo
- fascia sagomata per una migliore vestibilità
- parte anteriore grippante ampia per una buona adattabilità
- il materiale di base ha subito un trattamento Sanitized® odor-free

#### STECCATURA

- 3 stecche a spirale posizionate nella parte posteriore ed una nella parte anteriore utile ad evitare l'arricciamento e garantirne la stabilità

#### CHIUSURA ANTERIORE

- grippante con doppia patella indipendente, utile a garantire una personalizzazione e comfort assolute

#### NOTE

- la fascia può essere indossata anche a diretto contatto con la cute
- disponibile in altezza 27 cm
- disponibile in colore bianco e grigio

#### MISURE

Taglie	Ø Bacino
S	70-82 cm
M	82-94 cm
L	94-105 cm
XL	105-117 cm
XXL	117-130 cm
XXXL	130-150 cm



**Altezza**  
27 cm

#### Colori disponibili



## FPO 300

**COD. D'ORDINE:**  
FPO-300 (bianca)

### FASCIA ADDOMINALE ELASTICA COMPLETAMENTE APERTA



#### INDICAZIONI

Dispositivo atto al contenimento dei tessuti e della muscolatura del tronco.

Utile, ad esempio, negli scenari post-operatori di interventi addominali e post-partum.

MD

#### STRUTTURA

- tessuto in poliammide completamente grippante, elastico, traspirante e compressivo

#### STECCATURA

- nessuna

#### CHIUSURA ANTERIORE

- grippante con doppia patella indipendente, utile a garantire una personalizzazione e comfort assolute

#### NOTE

- la fascia può essere indossata anche a diretto contatto con la cute
- disponibile in altezza 27 cm
- disponibile in colore bianco

#### MISURE

Taglia unica

#### Altezza

27 cm

#### Colori disponibili



**FGP srl**

Via Alessandro Volta 3  
I-37062 Dossobuono VR  
T +39 0458600867  
F +39 0458600835  
www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it



AZIENDA CERTIFICATA  
ISO 13485:2016



Scarica l'App  
**FGPOrteSystem®**

