

**P+ FORCE - P+ EFFECT - P+ PERFECT ZIP
P+ YOUNG UP - P+ YOUNG EASY UP**

Camiseta postural



Orthopedic & Rehabilitation Equipment

SISTEMA POSTURE PLUS

Nuestro ingenio habla italiano, y comunica a todos la lengua universal del bienestar. Y a todos les dedicamos nuestra tecnología, nuestra búsqueda y las soluciones más innovadoras en el campo de la rehabilitación que nace del diálogo constante con los más revolucionarios del sector ortopédico y rehabilitador. Porque para nosotros en FGP, sentirse bien es un derecho de todos, y mejorar la vida de todos es nuestro empeño.

De este empeño nace el SISTEMA POSTURE PLUS: una solución de camisetas y pantalones posturales que, gracias a la sinergia entre la parte de tracción inelástica y tejido elástico confortable, estimula los impulsos propioceptivos para reducir en la postura correcta.

El SISTEMA POSTURE PLUS, es una propuesta de prendas fruto de la innovación, experiencia y tecnología FGP, completamente fabricado en Italia, para un bienestar dedicado a todos.

EMPRESA CERTIFICADA
UNI CEI EN ISO 13485:2016

Rev. 1 - 05/20


FGP srl
Via Alessandro Volta 3
I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835
www.fgpsrl.it - fgpp@fgpsrl.it
facebook.com/fgpsrl

CE



Orthopedic & Rehabilitation Equipment

REALINEACION DE LA COLUMNA DORSO-LUMBAR

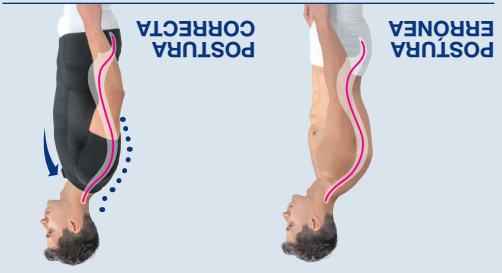

CONTRAINDICACIONES
Hasta ahora ninguna. Su correcta aplicación no da lugar a contraindicaciones.

ADVERTENCIA EN SU UTILIZACION

- Utilizar sobre piel sana
- Si hubieran heridas, tienen que ser cubiertas de modo adecuado.

MANTENIMIENTO

SIMBOLO	SIGNIFICADO
	Lavado a mano. NOTA: lavar con jabón suave
	Sin lejía
	No secar en secadora
	No planchar
	No lavar en seco

ALMACENAJE

Conservar en lugar seco y a temperatura ambiente. Proteger de fuente de calor directa y de exposición a la luz del sol y la humedad.

NOTA

Este dispositivo médico no ha sido concebido para ser utilizado sin la debida precaución. Por lo tanto, es aconsejable su utilización solamente después de haber consultado al médico o al técnico ortopédico para así evitar eventuales contraindicaciones. Para cualquier problema que aparezca después de la utilización del dispositivo, póngase en contacto con su médico o técnico. En caso de reclamación enviar la información a medi Bayreuth España S.L. vía teléfono 93 2600400, FAX 9302602314, o mail, pedidos@mediespana.com. La ortesis ha sido realizada para ser utilizada por un solo paciente.



Conservar en ambiente seco



Conservar lejos de la fuente de calor

SISTEMA POSTURE PLUS

P+ FORCE

ESTRUCTURA

- combinación de tejido elástico de base Sensitive® Fabric, asociado a cinchas de tensión dorsales de material inelástico.
- red transpirable en la zona axilar
- terminación con silicona en el borde inferior y cinchas a nivel escapular.

CIERRE

- con cremallera

INDICACIONES

- columna dorsal curvada no estructurada
- hiperlordosis no estructurada
- patología del hombro con compensación escapular
- cervicobraquialgia
- atrofia de la musculatura del tronco
- contractura muscular del trapecio, y de la escápula
- coadyuvante en la enfermedad de scheuermann y en la corrección de los vicios posturales
- coadyuvante en el dolor de la columna dorsal con la curva estructurada y fracturas claviculares

CODIGO DE PEDIDO:

color negro - PXT-SHIRT W mujer; PXT-SHIRT M hombre
color blanco - PXT-SHIRT B W mujer; PXT-SHIRT B M hombre

MEDICIONES

MUJER

	Ø Pecho	Ø Cintura
--	---------	-----------

XS	82-87 cm	64-69 cm
S	88-93 cm	70-75 cm
M	94-99 cm	76-81 cm
L	100-105 cm	82-87 cm
XL	106-111 cm	88-93 cm



UOMO

	Ø Pecho	Ø Cintura
--	---------	-----------

S	92-97 cm	82-87 cm
M	98-103 cm	88-93 cm
L	104-109 cm	94-99 cm
XL	110-115 cm	100-105 cm
XXL	116-121 cm	106-111 cm



P+ EFFECT / P+ PERFECT ZIP

ESTRUCTURA

- fabricada con la tecnología Seamless sin costura,
- hilo de microfibra para mayor comodidad, suavidad y transpiración
- tratamiento antibacteriano y termo-regulable
- trama particular de tejido elástico en la zona escapular y del biceps.
- estructura tridimensional a nivel lumbar para la transpiración, eliminar el sudor y mantener la zona seca.
- trama de red en la zona sub-axilar
- escote para una mayor comodidad.

CIERRE

- sin cremallera (P+ EFFECT)
- con cremallera (P+ EFFECT ZIP)

INDICACIONES

- columna dorsal curva no estructurada
- patología del hombro con compensación escapular
- cervicobraquialgia
- atrofia de la musculatura de la columna
- contractura muscular del trapecio, y de los mediadores de la escápula
- coadyuvante en la enfermedad mórbida de scheuermann
- coadyuvante en la corrección de los vicios posturales

CODIGO DE PEDIDO:

PPS-EFFECT B blanca; PPS-EFFECT N negra
PPS-PZIP B blanca; PPS-PZIP N negra

MEDICIÓN (UNISEX)

Talla

	Ø Pecho/Tórax
--	---------------

1°	80-95 cm
2°	95-110 cm
3°	110-125 cm



P+ YOUNG UP

ESTRUCTURA

- fabricada con tecnología Seamless sin costuras
- hilo de microfibra para mayor
- comodidad, suavidad y transpiración
- tratamiento antibacteriano y termo-regulador
- trama particular de tejido elástico en la zona escapular y del biceps
- estructura tridimensional para su transpiración y mantener la zona seca
- trama de red en la zona sub-axilar
- escote para mayor comodidad

CIERRE

- con cremallera

INDICACIONES

- columna dorsal curvada no estructurada
- patología del hombro con compensación escapular
- cervicobraquialgia
- atrofia de la musculatura del tronco
- contractura muscular de los trapecios y de los mediadores de la escápula
- coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad mórbida de Scheuermann
- coadyuvante en la corrección de los vicios posturales

CODIGO DE PEDIDO:

PPS-YOUNG UP B blanca; PPS-YOUNG UP N negra;

P+ YOUNG EASY UP

ESTRUCTURA

- fabricada con tecnología Seamless sin costuras
- hilo de microfibra para mayor
- comodidad, suavidad y transpiración
- tratamiento antibacteriano y termo-regulador
- trama particular de tejido elástico en la zona escapular y del biceps
- estructura tridimensional para su transpiración y mantener la zona seca
- trama de red en la zona sub-axilar
- escote para mayor comodidad

CIERRE

- sin cremallera

INDICACIONES

- columna dorsal curvada no estructurada
- patología del hombro con compensación escapular
- cervicobraquialgia
- atrofia de la musculatura del tronco
- contractura muscular de los trapecios y de los mediadores de la escápula
- coadyuvante en el tratamiento de la enfermedad mórbida de Scheuermann
- coadyuvante en la corrección de los vicios posturales

CODIGO DE PEDIDO:

PPS-YOUNG EASY UP B blanca; PPS-YOUNG EASY UP N negra;

MEDICIONES (UNISEX)

YOUNG UP Y YOUNG EASY UP

Talla

	Ø Tórax
--	---------

1°	60-67 cm
2°	67-74 cm
3°	74-80 cm



INSTRUCCIONES DE USO



Para P+FORCE, antes de colocar el dispositivo quitar la película protectora interna, colocar cerca del hombro la parte de tecnopolímero anti-deslizante

1. Vestir como una camiseta normal.